

BONNES PRATIQUES

d'utilisation du fauteuil électrique

L'utilisation du fauteuil roulant doit respecter les bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'usage du fabricant.



UTILISATION

La conduite d'un fauteuil roulant électrique ne doit pas faire l'objet d'une contre indication médicale. En intérieur ou en présence de personne, privilégiez les petites vitesses. Les obstacles et pentes doivent être pris de face et à une vitesse adaptée.



REPOSES PIEDS & ACCOUDOIRS

Les repose pieds peuvent être **escamotés** sur le coté ou retirés pour faciliter les transferts. Les accoudoirs peuvent être retiré pour les transferts. Tirer l'accoudoir vers le haut. Pour le replacer, insérer l'accoudoir dans son logement au niveau de l'assise.



CHARGE


Le fauteuil électrique à une autonomie limité en fonction du terrain. Pour **recharger** le fauteuil, munissez vous du chargeur confié lors de la livraison et brancher la fiche 3 points à l'arrière du joystick. Chargez votre fauteuil régulièrement. Vous pouvez **vérifier** la charge grâce au témoin lumineux du joystick.



JOYSTICK

Veillez à toujours **éteindre le joystick** lors des transferts. Allumer le joystick grâce au bouton supérieur.

Le **réglage** des vitesses se réalise grâce aux 2 boutons latéraux. Un témoin lumineux vous indique la vitesse sélectionnée.

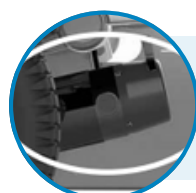

ROUE LIBRE

En cas de panne, vous pouvez passer le fauteuil en roue libre afin de déplacer le fauteuil d'un emplacement à un autre. En roue libre, le fauteuil est dépourvu de système de freinage. Un message d'erreur apparaît sur le joystick lors du passage en roue libre.

- Le transport en véhicule adapté, d'une personne installée sur son fauteuil doit respecter certains points de sécurité (ceinture, appui tête, kit de transport).
- Poids patient maximum 136 kg
- Lors de toute manipulation, veiller à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et du joystick.
- Vérifiez les pneumatiques et les vérins régulièrement.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54

