



BONNES PRATIQUES

d'utilisation du fauteuil manuel

L'utilisation du fauteuil roulant doit respecter les bonnes pratiques ainsi que les recommandations d'usage du fabricant.



FREINAGE

Les freins utilisateurs doivent être **enclenchés** à chaque transfert.




REPOSES PIEDS & ACCOUDOIRS

Les repose pieds peuvent être **escamotés** sur le coté ou retirés pour faciliter les transferts. Les accoudoirs peuvent être relevés vers l'arrière pour les transferts.



ROUES

Vous pouvez retirer ou installer les roues arrières en appuyant sur le bouton de déverrouillage rapide. Lors de la remise en place, le bouton doit revenir dans sa position de départ. **Vérifier** systématiquement que la roue est bien bloquée.

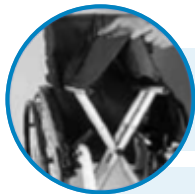

MANIPULATION

Pour **plier** le fauteuil, enlever le coussin d'assise et rabattre les repose pieds. Saisir la toile d'assise avec deux doigts et tirer vers le haut.

Pour ouvrir le fauteuil, placer les deux mains à plat et pousser sur la toile d'assise au niveau des tubes du siège. **Attention de ne pas vous coincer les doigts.**



ANTI BASCULE

La roulette anti bascule doit être **installée** systématiquement afin d'éviter à l'utilisateur de basculer vers l'arrière. Pour franchir un obstacle il est possible de la relever en appuyant sur le bouton. **Veillez** toujours à l'abaisser une fois l'obstacle franchi.

- Le transport en véhicule adapté, d'une personne installée sur son fauteuil doit respecter certains points de sécurité (ceinture, appui tête, kit de transport).
- Poids patient maximum 125 kg
- Vérifiez les pneumatiques et les vérins régulièrement.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

